

Починаючи роботу

Кожен компонент матричної системи Palodent® V3 оптимізований таким чином, щоб забезпечити максимально просту і швидку реставрацію за класом II



659700v

Ввідний набір

100 матриць – 25 шт. кожного розміру:
3,5 мм; 4,5 мм; 5,5 мм; 6,5 мм
75 клинів – 25 шт. кожного розміру:
малі, середні, великі
30 клинів із захистом – 10 шт. кожного розміру:
малі, середні, великі
1 універсальне кільце, 1 вузьке кільце,
щипці, пінцет



Універсальне кільце (світло-блакитне)

- Ni-Ti сплав має підвищену міцність та пам'ять форми
- Багаторазового використання
- V-подібні зубці з пластика посилені скловолокном



Вузьке кільце (темно-синє)

- Для оптимальної сепарації зубів меншого розміру
- Сила сепарації до 4 кг на премолярах



Матриці з покриттям EZ (5 розмірів)

- Ультратонке спеціальне покриття EZ дозволяє простіше видаляти матрицю, а також редукує відбиття світла, покращуючи огляд робочого поля
- Покращений вигин матриці, анатомічна точність крайового прилягання і спрощене позиціонування кільца
- Кодування кольорами для зручності



Матриці (5 розмірів)

- Виражений крайовий гребінь для ідеальної анатомії
- Ясневий виступ для запобігання утворення проміжків у апраксимально-підясневих зонах



Клини (3 розміри)

- Крила клинів стискаються і розпрямляються, що сприяє легкому позиціонуванню
- Прожнистий клин не травмує сосочки ясен і дає змогу встановлювати клини один на одного



Клини з захистом (3 розміри)

- Після препарування захист виймається, при цьому клин залишається на місці
- Спрощує процедуру препарування, запобігаючи пошкодженню сусіднього зуба

Пінцет

- Пінцет з позитивним захоплювачем для надійної фіксації матриці та клина
- Природно закрита позиція мінімізує ризик випадання матриці або клина
- Вбудований кулястий штопфер на кінчику

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ЗАМОВЛЕННЯ

Кільца.

Додаткова упаковка

- 659900v** Універсальне (1)
659760v Універсальне (2)
659770v Вузьке (2)

Матриці EZ.

Додаткова упаковка

- 659610v** 3,5 мм (50)
659620v 4,5 мм (50)
659630v 5,5 мм (50)
659640v 5,5 мм (90)
659650v 6,5 мм (50)
659660v 7,5 мм (50)

Матриці.

Додаткова упаковка

- 659710v** 3,5 мм (50)
659720v 4,5 мм (50)
659730v 5,5 мм (50)
659740v 5,5 мм (100)
659750v 6,5 мм (50)
659860v 7,5 мм (50)

Клини.

Додаткова упаковка

- 659780v** Малі (100)
659790v Середні (100)
659800v Великі (100)

Клини з захистом.

Додаткова упаковка

- 659830v** Малі (50)
659840v Середні (50)
659850v Великі (50)

Інструменти.


- 659810v** Щипці (1)
659820v Пінцет (1)



Представництво
«Дентсплай Лімітед» в Україні
Україна, 03038, м. Київ,
вул. Нововокзальна, 2
Тел.: +38 (044) 594 56 04
www.dentsplysirona.com

Dentsply
Sirona

Palodent® V3
Секційна матрична система

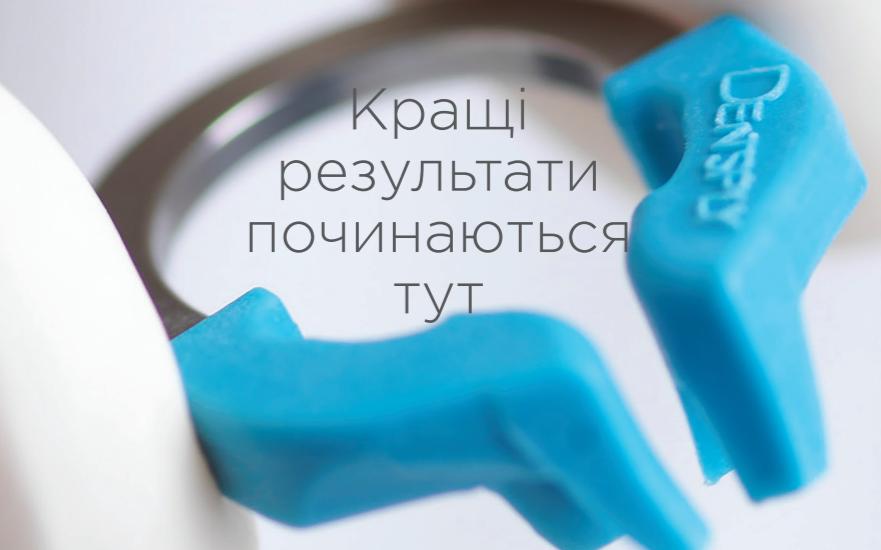

Dentsply
Sirona

Palodent® V3

«70% стоматологів вважають, що створення контактного пункту є найскладнішим етапом реставрації за класом II»¹

¹ DentalTown (2012). Restorative Dentistry. Опитування: найскладніший етап реставрації за класом II.

Створення високоякісних реставрацій за класом II

Palodent® V3 – іноваційна секційна матрична система, що забезпечує створення передбачуваних і щільних контактних пунктів. Сепараційні кільця з нікель-титану, анатомічні матриці та зручні клини стануть незамінними інструментами при створенні реставрацій з природною анатомією зуба.


«Я просто обожнюю Palodent® V3. Не можу повірити, що останні 13 років я працював без цієї системи. Мені навіть ніякovo, що мої реставрації за класом II могли мати абсолютно рівні стінки, без будь-яких рельєфів»

M. Rodrigue, DDS



Palodent® V3 забезпечує покращений результат навіть у випадках з широкими порожнинами і відсутністю горбів. А контураний дизайн матриц і клінів дозволяє мінімізувати час на фінішну обробку. Десятки тисяч стоматологів та студентів по всьому світу використовують Palodent® V3 в якості основи для успішного лікування.

Кращі результати починаються з Секційної матричної системи

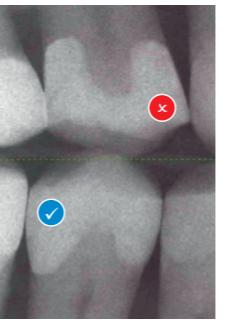


Кільцева матриця (Tofflemire)	Секційна матрична система
✗ Не відновлює проксимальну анатомію	✓ Проста у використанні система
✗ Слабкий контакт в області крайового гребеня	✓ Природний вигин матриці
✗ Підвищена ймовірність утворення тріщин, оклюзійної інтерференції, рецидиву каріесу і пародонтозу	✓ Щільний, анатомічно правильний контактний пункт
✗ Збільшення простору, де може застрайгати інка	✓ Мінімальна міжпроксимальна фінішна обробка
✗ Підвищена ймовірність слабкого або відкритого контактного пункту	
✗ Може потребувати довготривалої фінішної обробки	

Секційна матрична система vs Кільцева матриця


Кільцева матриця Tofflemire була розроблена в 1940 році для проведення амальгамних реставрацій. Система не передбачала роботи з сучасними матеріалами, тому матриця не може гарантувати оптимальних результатів з композитними реставраціями.

Секційні матричні системи, навпаки, були створені для сучасних композитних реставраційних матеріалів.

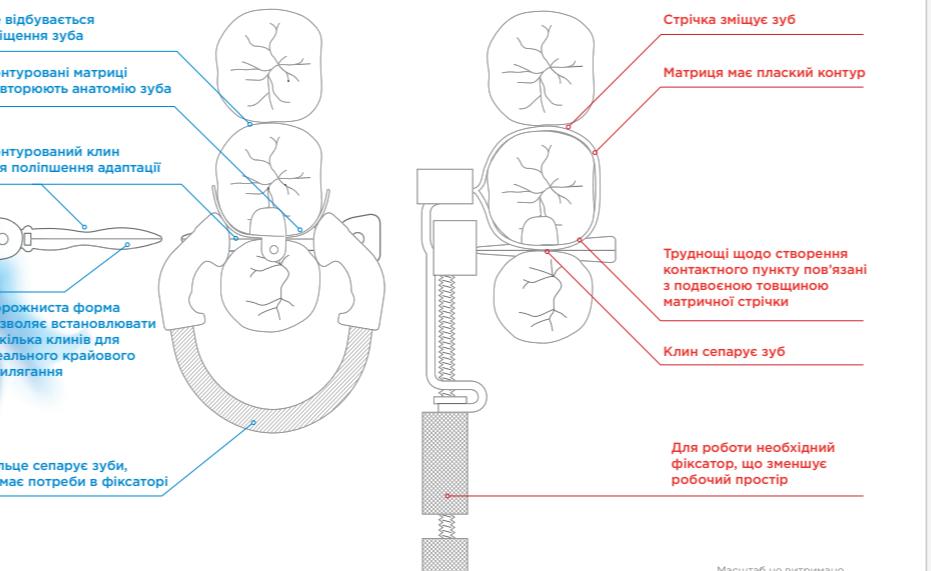

Позбався від стресу в процесі створення Реставрації за класом II


- 1 Кільця з Ni-Ti сплаву мають підвищену міцність на вигин та пам'ять форми
- 2 V-подібні зубці з пластику посилені скловолонком
- 3 Отвори в кліні під пінцет для легкого позиціонування та видалення
- 4 Яичок для легкого позиціонування та видалення матриці
- 5 Ясенний виступ для запобігання утворення проміжків у апроксимально-під'ясневих зонах
- 6 Покращений вигин: матриця ідеально прилягає до зуба
- 7 Виражений крайовий гребінь для природної анатомії

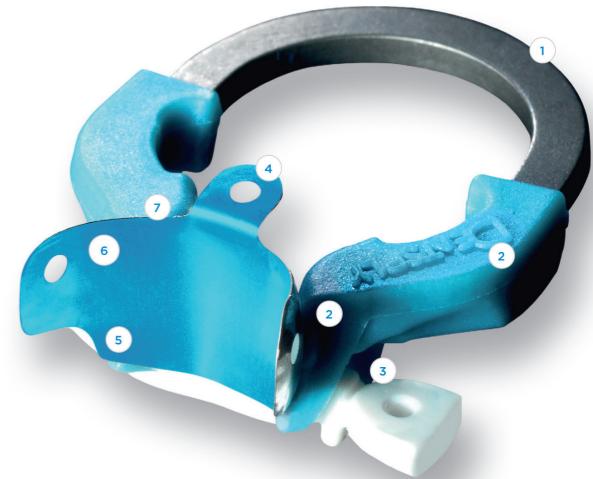


4 простих кроків до ідеальної реставрації за класом II




Використовуючи пінцет, розташуйте клін із захистом Palodent® V3 з яичного або щічного боку та починайте препарування.

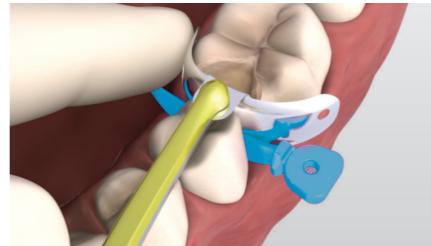

Використовуючи пінцет, встановіть матрицю Palodent® V3.

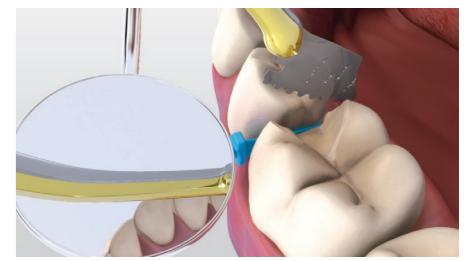

Використовуючи пінцет та ручний інструмент, виділіть захисний бар'єр після завершення препарування.

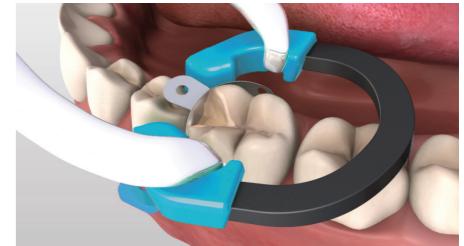

Використовуючи щипці, розташуйте кільце Palodent® V3 для забезпечення сепарації.

¹ Див. інструкцію для отримання докладнішої інформації