



 Proudly
made in Italy

Автоклави B-S-N класу

6, 18, 23 і 60 - літрів



2-Роки
Гарантії

Антимікробне
покриття
від компанії



Досвідчений експерт з автоклавування

Обслуговуємо стоматологів, лікарні, ветеринарні клініки та салони краси

Ми гордимся тим, що є Італійською компанією з багаторічною історією у виробництві автоклавів. Завдяки нашому фокусуванню на обслуговуванні стоматологів, лікарень, ветеринарних клінік і салонів краси, ми надаємо індивідуальні рішення для автоклавування стільки, скільки себе пам'ятаємо.

Потужний колектив з 2200 спеціалістів

Newmed гордий бути членом корпорації Midmark

Ми пишаємося тим, що є членом корпорації Midmark, відомого американського виробника медичних виробів зі штатом понад 2 200 кваліфікованих фахівців. Ця співпраця поєднує в собі досвід Newmed у виробництві автоклавів із величезними ресурсами та галузевим досвідом Midmark. Разом ми пропонуємо виняткові рішення для автоклавування, які відображають синергію між італійською майстерністю та силою відомої американської компанії.

Початок виробництва 23 L автоклавів

Початок виробництва 6 L автоклавів

Початок виробництва 18 L автоклавів

 midmark®
купе Newmed

Початок виробництва 6 L автоклавів



newmed

Розраховуйте на нас протягом 15 років

У 3 рази довший термін служби ніж у конкурентів



Ми переосмислюємо довговічність та надійність наших автоклавів, які можуть похвалитися в 3 рази довшим терміном служби, ніж у конкурентів.

Наші прилади славляться своєю бездоганною роботою, встановлюючи новий стандарт галузі, стабільно і оптимально працюючи протягом 15 років.

Продано 40000+ приладів у 90 країнах світу

Від Європи до Близького Сходу, від Азії до Південної Америки

Охоплення Newmed не знає меж. Продавши 40 000 автоклавів по всьому світу, від Європи до Близького Сходу і від Азії до Південної Америки наші рішення для стерилізації завоювали довіру клієнтів у всьому світі

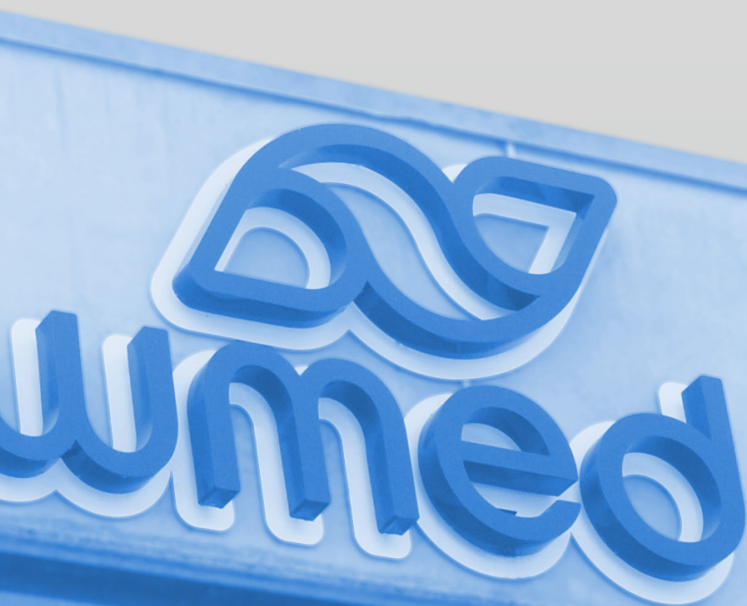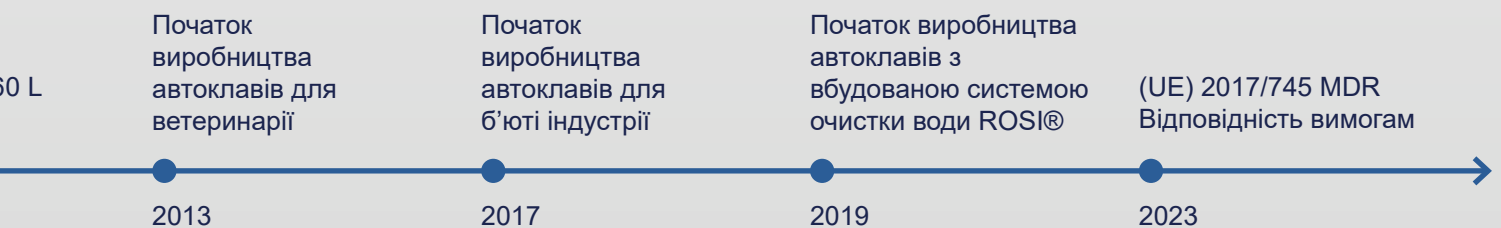

Midmark 18 & 23

Глибина камери: 381 або 530 mm





2-Роки гарантії

Єдина в своєму роді пропозиція у світовому секторі автоклавів. Відповідно до умов.



Антимікробне покриття

BioCote антимікробне покриття пригнічує ріст мікробів, таких як бактерії та грибки, на поверхнях автоклавів, забезпечуючи більш гігієнічне обладнання. Для отримання додаткової інформації дивіться сторінку 12.



Стандартний водяний насос

Завдяки вбудованому фронтальному водяному насосу ви можете тримати резервуар на землі. Просто натисніть кнопку, і автоклав наповниться сам. Дренаж, з іншого боку, може бути як ручним, так і автоматичним.



Вбудований фільтр зворотнього осмосу (Опція)

Замовте систему очистки ROSI®(Опція), щоб легко підключити пристрій до водопровідної води. Ця конфігурація забезпечує вражаюче середнє значення 1300 циклів роботи. Дивіться сторінку 10.



Вбудований принтер

Просто документуйте та контролюйте процеси стерилізації, щоб переконатися в дотриманні нормативних вимог та оптимізації операцій.



Документування без паперу

Додатковий реєстратор (Опція) даних зручно зберігає записи про стерилізацію на USB-накопичувач. У поєднанні з нашим власним програмним забезпеченням ви можете легко отримати доступ до записів і прочитати їх на своєму ПК.



Додаткове висушування

Виберіть між 5 або 15 додатковими хвилинами для ретельної стерилізації без вологи.



Стерилізація та висушування за 19 хвилин

В автоклаві В-Класу на 18 л неймовірна швидкість стерилізації досягається завдяки використанню попередньо нагрітої камери в поєднанні з ефективністю швидкого циклу 134°C



Розумна ощадливість

Вибір з 10 циклів (в В і S-Class) дозволяє оптимізувати споживання води та електроенергії залежно від навантаження. Режим очікування активується через 60 хвилин для економії енергії, а відкладений старт працює в непікові години енергії.



Безпека

Механізм автоматичного замикання дверей і система перевірки якості води, гарантують незмінну безпеку процедур стерилізації, забезпечуючи при цьому спокій завдяки своєчасній доставці нагадувань про технічне обслуговування.



Найглибша камера

Серед автоклавів з такими ж параметрами, наш блок об'ємом 23 л з гордістю має найглибшу камеру, яка має вражаючі 530 мм і забезпечує достатньо місця для розміщення навіть найдовших інструментів.



Вибір класу під ваші потреби

Вибирайте моделі В, S і N-класу, кожна з яких розроблена для надання спеціалізованих рішень для стерилізації, які відповідають вашим унікальним потребам.

ROSI®: Компактна система очистки води

Вбудований зворотній осмос(Опція)

ROSI® – це інноваційна функція, ексклюзивно для наших автоклавів об'ємом 18 і 23 літри. Вона складається з 3 картриджів, розміщених усередині пристрою, які фільтрують подачу питної води в очищену воду для виробництва пари. Вода спочатку проходить через вугільний фільтр, який усуває хлор, осад і леткі органічні сполуки. Потім йде картридж зворотного осмосу, який видаляє кальцій, залізо, сіль, бактерії, віруси, частинки та хімічні речовини, перш ніж нарешті протікати через смоляний фільтр, разом забезпечуючи воду відповідної якості для генерації пари..

Окупність системи менше ніж за 6 місяців

Кількість робочих днів на місяць:	21
Кількість циклів на день:	4
Літрів (L) на цикл:	0.5
Вартість 1 літра демінералізованої води (Україна. 2024):	€0.94
Вартість 1 літра водопровідної води (Україна. 2024):	€0.000644
Вартість ROSI®:	€250

Вартість очищеної бутильованої води для циклів стерилізації на місяць: €39.48
Вартість очищеної водопровідної води для стерилізації на місяць:





Заощаджуйте €350 щорічно

Враховуючи середню ціну в 0,94 євро за літр очищеної води та припускаючи 1,000 циклів на рік по 500 мл за цикл, технологія ROSI® заощаджує вам близько 350 євро на рік.



Жодного додаткового місця

Ви не тільки підключаєте свій автоклав безпосередньо до водопроводу, але й насолоджуєтеся унікальною перевагою, яка полягає в тому, що вам не потрібен додатковий простір для зовнішньої системи очищення.



Аж до 1900 циклів

На основі наших тестів з водою низької якості (1 000 мкСм/см або 500 TDS), Заміна вугільних і смоляних фільтрів повинна проводитися кожні 1,900 циклів.



Забудьте про важкі каністри

Попрощавшись із важкою роботою та постійними витратами на придбання ємностей для очищеної води, ROSI® позбавляє від необхідності купувати та перевозити громіздкі резервуари для води.



Високоякісне очищення

Зворотному осмосу довіряють у всьому світі за його здатність вибірково фільтрувати навіть найдрібніші частинки, солі, мінерали та забруднювачі з води, не залишаючи нічого, крім чистої H₂O.



Вчасні повідомлення

Програмне забезпечення надає сповіщення, коли картриджі закінчуються, даючи вам час зв'язатися зі своїм техніком. Крім того, ви можете продовжувати використовувати передне заповнення, щоб підтримувати робочий процес без перерв.



Midmark 60 & 60 SI

Клас В 60-літровий автоклав: рішення 3 в 1



Для чого це потрібно?



«Нам потрібно було розмістити все наше ортопедичне обладнання, включаючи ортопедичні бормашини, ендопротези суглобів, штифти, пластини та гвинти. Він незмінно демонструє відмінні результати роботи».

Dr. Jeremy Onyett @Abington Park Referrals, United Kingdom



«Ми шукали економічно ефективне рішення. Ми можемо досягти однакових результатів стерилізації лише за один цикл у порівнянні з двома циклами, необхідними для меншого автоклава, весь час споживаючи менше води та електроенергії».

Dr. Angelo Della Bona @Dental DB, Italy



«Ми часто використовували наш нинішній автоклав об'ємом 23 літри. Наша мета полягала в тому, щоб зменшити кількість щоденних циклів і стерилізувати більші хірургічні касети».

Dr. Erika Vranková @Andel Elite, Slovakia

Більше на каналі Newmed на YouTube.



2 роки гарантії

Єдина в своєму роді пропозиція у світовому секторі автоклавів. Згідно з умовами.



Заощаджуйте гроші

Незважаючи на те, що він більший за розміром, він працює інтелектуально, сприяючи економії води та електроенергії, а також спрощення обслуговування та валідації в порівнянні з використанням 3 універсальних автоклавів об'ємом 18 л.



На 50% менше місця

До 12 кг вантажу, і все це займаючи на 50% менше місця, ніж 3 універсальні автоклави на 18 л. Покращте налаштування, включивши шафу, надавши універсальне рішення, адаптоване до ваших уподобань.



Вбудований принтер і USB

Просто документуйте та контролюйте процеси стерилізації, щоб переконатися у дотриманні нормативних вимог та оптимізації операцій.



Живлення 220V або 380V

Модель 60 SI пропонується з парогенератором з 3-фазним підключенням тоді як варіант 60 має підключення 220 В.



Вже з вбудованим осмосом

Вбудований OSMO3, з датчиком якості води, дозволяє напряму підключати пристрій до водопровідної води і насолоджуватися вражаючими 750 циклами (500 TDS води) роботи, перш ніж датчик подасть сигнал, коли потрібне технічне обслуговування.



Midmark 6

1 kg стерильного та висушеного інструментів за 12 хв.





2 - Роки гарантії

Єдина в своєму роді пропозиція у світовому секторі автоклавів. Відповідно до умов.



Стерильні та Сухі за 12 хв.

Надзвичайна швидкість завдяки попередньо нагрітій камері та 134°C В SOLIDS OPEN (Повнотілі HE Запаковані) циклу.



Вбудована водяна помпа

Завдяки вбудованому фронтальному водяному насосу можна тримати резервуар на землі. Просто натисніть кнопку, і автоклав заповниться сам.



Бюджетний

Нижча ціна в порівнянні з більшими моделями роблять його правильним вибором, особливо коли є бюджетні обмеження.



Вбудований принтер

Просто документуйте та контролюйте процеси стерилізації, щоб переконатися в дотриманні нормативних вимог та оптимізації операцій.



Автоматичне наповнення

Односторонній вхідний отвір для автоматичного наповнення попередньо очищеної води, що спрощує процес і зводить до мінімуму необхідність ручного втручання. Дренаж, з іншого боку, може бути як ручним, так і автоматичним.



Економія ресурсів

Вибір із 10 циклів дає змогу оптимізувати споживання води та електроенергії залежно від навантаження.



Документування без паперу

The optional data logger conveniently saves sterilization records onto a USB drive. Coupled with our proprietary software, you can easily access and read the records on your PC.



Додаткове висушування

Виберіть між 5 або 15 додатковими хвилинами сушки для ретельної стерилізації без вологи.



Розумна ощадливість

Режим очікування активується через 60 хвилин для економії енергії, а відкладений старт працює в непоківі години споживання енергії.



Безпека

Механізм автоматичного замикання дверей і система перевірки якості води, гарантують незмінну безпеку процедур стерилізації, забезпечуючи при цьому спокій завдяки своєчасній доставці нагадувань про технічне обслуговування.



Вибір класу під ваші потреби

Вибирайте моделі B, S і N-класу, кожна з яких розроблена для надання спеціалізованих рішень для стерилізації, які відповідають вашим унікальним потребам.

Представляємо BioCote

BioCote є провідною антимікробною добавкою на ринку вже понад 25 років. Поставляється у вигляді добавок, матеріал BioCote додається в продукцію для захисту її від широкого спектру мікробів в тому числі бактерій і грибків.

Newmed & BioCote

Ми співпрацюємо з BioCote виключно з метою ще більше зміцнити нашу прихильність до забезпечення відповідності продукції очікуванням і стандартам на користь як професіоналів, так і пацієнтів. Це партнерство спрямоване на запобігання поширенню мікроорганізмів, таких як бактерії та пліснява, у всіх сферах, виробляючи обладнання, яке має менший ризик перехресного забруднення під час процедур та операцій для пацієнтів.

Чому BioCote краща ніж інші протимікробні добавки?

Продукти під брендом BioCote містять технологію іонів срібла. Ця технологія ще більше підвищує продуктивність і цінність продукту, залишаючись при цьому технічно сумісною з його матеріалом і сферою застосування.

Що таке мікроб?

Мікроб - це організм настільки малий, що для того, щоб його побачити, потрібен мікроскоп. До мікробів включають бактерії та грибки, такі як *Legionella*, *Campylobacter*, псевдомонада, *Shigella* та *Aspergillus Niger*. Мікроби можуть спричинити появу плям на матеріалах, неприємного запаху та скоротити термін служби автоклава.



Unprotected

БІЙНИЙ ЗАХИСТ

Зменшує кількість мікробів до 99,99%

Факти

BioCote зменшує присутність мікробів на захищеному продукті на 99,99%.

BioCote діє швидко і може зменшити кількість бактерій на захищеному продукті на 86% за 15 хвилин і на 99,5% всього за 2 години.

BioCote є постійним і забезпечує вбудований захист на весь очікуваний термін служби вашого продукту.

BioCote забезпечує безперервний цілодобовий захист від мікробної колонізації.

Додатки BioCote або продукти, що їх містять, не викликають розвиток бактерій, стійких до антибіотиків.



Як отримати BioCote на автоклавах Newmed?

Ми вже впровадили антимікробну технологію BioCote в наші 18 і 23-літрові автоклави, забезпечуючи додатковий рівень захисту від перехресного забруднення. Це особливо важливо в середовищах, де обладнання може забруднюватися через перенесення бактерій з однієї поверхні на іншу. Наш автоклав з технологією BioCote, гарантує користувачам, що обладнання призначене для ефективного контролю наявності мікроорганізмів відповідає вимогам.

Чи зміниться вигляд автоклава?

Це інноваційне вдосконалення легко інтегрується в існуючу конструкцію автоклава, зберігаючи його первісний вигляд. Таким чином, ви можете насолоджуватися перевагами більш чистого середовища без шкоди для елегантного і професійного вигляду автоклава.

Цикли стерилізації

	B - Клас					S - Клас		N - Клас	
	6 L	18 L	23 L	60 L	60 L SI	18 L	23 L	18 L	23 L
Helix Тест (мінім. час стерилізації: 3.5 хв)	19	25	35	110	80	X	X	X	X
134°C Bowie-Dick Тест (мінім. час стерилізації: 3.5 хв)	19	25	35	110	80	28	38	X	X
Вакуум Вакуум Тест (хв.)	15	15	15	15	15	15	15	X	X
134°C Пустотілі Запаковані (мінім. час стерилізації: 5 хв)	20	27	37	95	65	32	42	X	X
121°C Пустотілі Запаковані (мінім. час стерилізації: 18 хв)	23	40	50	120	70	43	53	X	X
134°C Prion (мінім. час стерилізації: 20 хв)	35	39	49	130	70	47	57	40	50
134°C Повнотілі Запаковані (мінім. час стерилізації: 5 хв)	20	22	32	105	40	29	39	X	X
121°C Повнотілі Запаковані (min. steriliz. time: 18 min)	X	35	45	95	55	40	50	X	X
134°C Пористі (мінім. час стерилізації: 5 хв)	25	32	42	140	90	43	53	X	X
121°C Пористі (мінім. час стерилізації: 18 хв)	38	45	55	X	X	53	63	X	X
134°C Rapid Швидкий (мінім. час стерилізації: 5 хв)	X	19	29	X	X	23	33	18	28
121°C Rapid Швидкий (мінім. час стерилізації: 18 хв)	X	29	39	X	X	35	45	28	38
134°C Пустотілі HE Запаковані (мінім. час стерилізації: 5 хв)	12	20	30	X	X	30	40	X	X
121°C Пустотілі HE Запаковані (мінім. час стерилізації: 5 хв)	25	X	X	X	X	X	X	X	X

Примітка: Значення включають попереднє нагрівання та сушіння; Час залежить від навантаження та джерела живлення; X не доступні

Технічні характеристики

	6 L	18 L	23 L	60 L
Розмір камери (Ø x Г), mm	170 x 265	236 x 381.5	236 x 530	355 x 622
Максимальне завантаження (В-Клас)	1 kg заповані інстр. 1.8 kg не запован. інстр. 0.5 kg текстиль	2.5 kg запован.інстр. 4 kg не запован. інстр. 1 kg текстиль	3.5 kg запован. інстр. 4.5 kg не запован. інстр. 1.5 kg текстиль	12 kg запован. інстр. 11 kg не запован. інстр. 6 kg текстиль
Максимальне завантаження (S-Клас)	-	1 kg запован. інстр. 2.5 kg не запован. інстр. 0.5 kg текстиль	2 kg запован. інстр. 3.5 kg не запован. інстр. 0.5 kg текстиль	-
Максимальне завантаження (N-Клас)	-	3 kg не запован. інстр.	4.5 kg не запован. інстр.	-
Розмір приладу (Ш x Г x В)	450 x 590 x 345 mm	505 x 615 x 400 mm	505 x 690 x 400 mm	655 x 850 x 755 mm
Door Clearance Space	350 mm	350 mm	350 mm	1.300 mm
Мінімальна глибина стільниці	417 mm	427 mm	472 mm	670 mm
Вага	42.5 kg	52 kg	58 kg	138 kg
Напруга живлення	220 - 240 V 50 - 60 Hz	220 - 240 V 50 - 60 Hz	220 - 240 V 50 - 60 Hz	60: 220 - 240 V 50 - 60 Hz 60 SI: 390 - 410 V 50 - 60 Hz
Потужність споживання	2,500 W	2,400 W	2,400 W	B60: 11 A B60SI: 13 A на 1 фазу
Об'єм баку чистої води	4 L	4 L	4 L	4 L
Об'єм баку використ. води	4 L	4 L	4 L	4 L
Розміри лотків (Ш x Г x В), mm	1шт. - 150 x 240 x 19 2шт. - 115 x 240 x 19	4шт. - 185 x 285 x 18	4шт. - 185 x 440 x 19	2шт. - 310 x 550 x 25 2шт. - 220 x 550 x 25
Акcesуари в комплекті	3 лотки, 1х двосторонній стелаж, 1х тримач лотків, 1х губка, заводські тести, трубки наповнення і зливу	4 лотки, 1х двосторонній стелаж, 1х тримач лотків, 1х губка, заводські тести, трубки наповнення і зливу	4 лотки, 1х двосторонній стелаж, 1х тримач лотків, 1х губка, заводські тести, трубки наповнення і зливу	4 лотки, 1х стелаж, 1х губка, 1х рукавиця, 1х водяний фільтр, заводські тести, трубки
Regulatory Compliance	CE сертифіковано відповідно до Reg. (EU) 2017/745 Dir. 2014/68/EU (Директива про обладнання, що працює під тиском) Dir. 2012/19/EU			
Стандарти	EN 13060 (Малі парові стерилізатори) EN 61010-1 (Вимоги безпеки) EN 61010-2-040 (Специфічні вимоги до парового стерилізатора) EN 61326-1 (Електромагнітна сумісність)			
Сертифікати	ISO 9001 ISO 13485			

Експерт у галузі автоклавування

Made in Italy by

Newmed S.r.l.
Via Lenin 79/A
42020 Quattro Castella (RE), Italy
+39 0522 875 166
newmed.sales@midmark.com
www.newmedsrl.com

Newmed is owned by

Midmark Corporation
60 Vista Drive
Versailles, Ohio 45380, U.S.A.
www.midmark.com

Distributed by

Premier-Dental Ltd
Офіс та магазин:
вул. Варшавська 69Б, 79020, Львів, Україна
тел.: + 38 (097) 445 6673
(Viber/ Telegram) + 38 (063) 318 1819
e-mail: premier@dental.net.ua

Магазин:
вул. Личаківська 104, 79010, Львів, Україна
тел.: + 38 (067) 128 2521
(Viber) + 38 (063) 225 8592
e-mail: premier@dental.net.ua