

THE DENTAL
SOLUTIONS
COMPANY™



Teneo

Идеальная гармония инноваций

www.dentsplysirona.com





Идеальная гармония инноваций



Тенео руководствуется бескомпромиссным принципом: вам подойдет только самое лучшее. Вы достигаете идеальной гармонии рабочего процесса, только если оптимально взаимодействуете со стоматологической установкой. Поэтому Тенео безусловно отвечает всем вашим индивидуальным потребностям. Даже самые мельчайшие детали тщательно разработанных функций помогут вам при лечении в любой ситуации. Использование функций обеспечения комфорта гарантирует, что во время лечения ваши пациенты будут чувствовать себя расслабленными. Поэтому вы можете полностью сосредоточиться на своей работе. Зачем соглашаться на меньшее?



Новый подход к лечению

Ваши ежедневные усилия по лечению пациентов – ключ к успеху клиники. Установка Teneo была разработана, чтобы соответствовать задачам стоматолога. Только если вы будете работать эффективно и эргономично, ваши пациенты смогут в полной мере получить выгоду от ваших профессиональных навыков. Чтобы полностью подстроиться под ваши потребности, Teneo оснащен различными автоматическими и моторизованными функциями.

Зачем соглашаться на меньшее?

Благодаря электромеханическому перемещению модуля врача параллельно креслу пациента, автоматическому подголовнику и поворотной плевательнице, Teneo отлично подстроится под ваш рабочий процесс.

Вы контролируете каждое движение – как и Teneo

Чтобы вы могли полностью сосредоточиться на своих пациентах, электромеханическое перемещение модуля врача параллельно креслу пациента позволяет держать все необходимое под рукой – без помощи рук и без усилий. Вы и ваш ассистент сможете всегда работать в максимально эргономичном положении.



Оптимальное расположение для лучших движений



Отличная координация и гибкое позиционирование модулей врача и ассистента, независимое позиционирование поддона и модуля врача для обеспечения как совместной работы, так и работы в одиночку.

Управление без помощи рук



Беспроводная педаль – это многофункциональный элемент управления креслом пациента, дисплеем EasyTouch и перемещением модуля врача.

Эргономичное лечение пациентов – с помощью Teneo

Для сохранения здоровой осанки врача во время лечения требуется правильно расположить пациента в кресле и получить к нему максимальный доступ. Благодаря автоматическому подголовнику, поворотной плечевой лавке и электромеханическому перемещению модуля врача параллельно креслу пациента, Teneo полностью обеспечивает комфортное положение стоматолога и пациента.



Положение рта пациента по вертикали



Тенео знает, каким должно быть ваше идеальное рабочее положение. Чтобы вы всегда могли работать в оптимальной позиции, положение рта всегда находится на одинаковой рабочей высоте даже у пациентов разного роста (см. иллюстрации).

Автоматический подголовник



Для наилучшего доступа к области лечения наклон и перемещение автоматического подголовника можно регулировать с помощью педали ножного управления, пользовательского интерфейса или вручную.

Автоматическая плевательница



Плевательница может автоматически поворачиваться к пациенту и от него. Положение плевательницы можно запрограммировать, что способствует быстрому и безопасному проведению всех процедур.

sirona.



17:28:32 A

Различия в деталях

Для стоматологического лечения очень важно, чтобы процедуры не прерывались. Поэтому вам необходима стоматологическая установка, функции которой тщательно адаптированы к вашему рабочему процессу.

Тенео поставляется с широким диапазоном уже встроенных функций, а пользовательский интерфейс настраивается так, чтобы вы могли использовать весь спектр методов лечения.

Зачем соглашаться на меньшее?

Стоматологическая установка Тенео идеально сконфигурирована: в ней есть мощный пользовательский интерфейс, 6 настраиваемых позиций для инструментов и 1 дополнительная, а также множество вспомогательных средств коммуникации с пациентом. При нажатии всего одной клавиши установка идеально подойдет для проведения эндодонтического или имплантологического лечения.



Вам нужна полная свобода работы – Teneo гибко настраивается

Встроенные функции имплантологии и эндодонтии делают настройку стоматологической установки излишней, поскольку больше не требуются настольные приборы. Все функции контролируются с помощью ножного управления. Это обеспечивает плавный переход от обследования к лечению пациента. Многочисленные дополнительные функции, например, функция апекслокатора или Implant Terminal в ПО Sidexis 4 делают Teneo идеальным решением для любой клинической ситуации.

Teneo поддерживает все современные системы реципрокных файлов: например, Wave One, Wave One Gold, Reciproc и Reciproc blue.





Эндодонтия

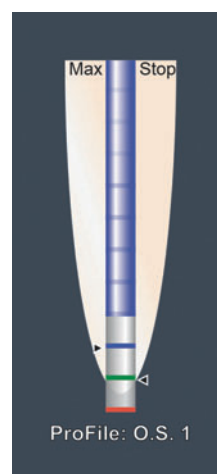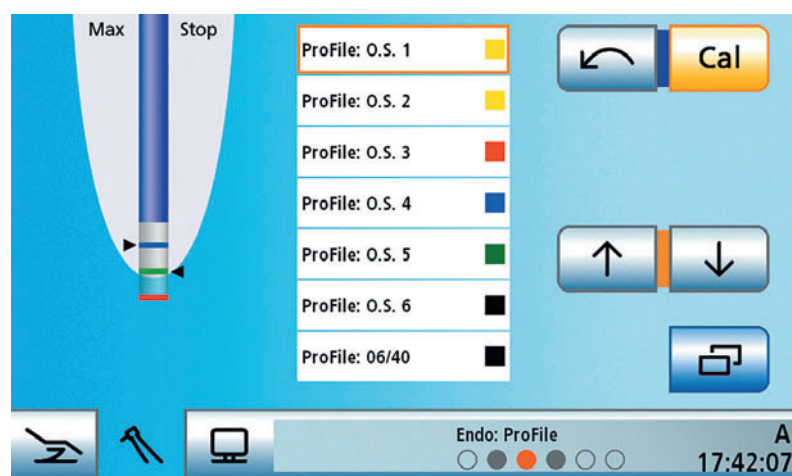

Апекслокатор*

Система точного управления крутящим моментом, апекслокатор и уникальная библиотека файлов упрощают рабочий процесс, обеспечивая максимальную клиническую безопасность. Управление осуществляется педалью ножного управления.

Имплантология

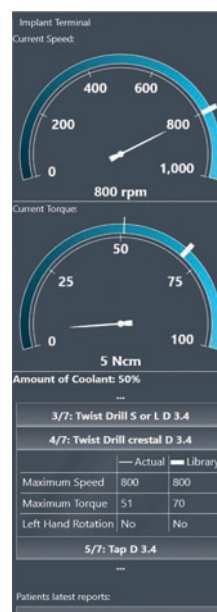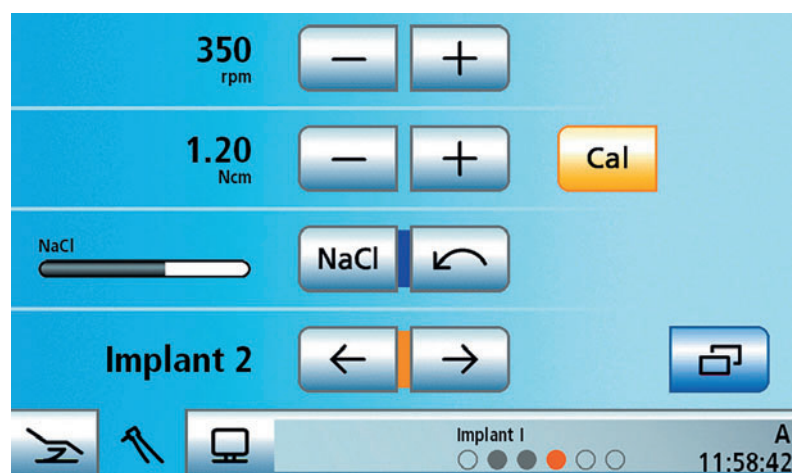

Implant Terminal*

Настройте Teneo в соответствии со своими требованиями или выберите систему имплантатов из встроенной библиотеки. Скорость, крутящий момент и скорость потока охлаждающей жидкости всегда находятся под вашим контролем.

* Данные апекслокатора и Implant Terminal отображаются на мониторе Sivation.

Вы хотите быть лучше в каждой детали – Teneo предлагает еще больше

В стоматологической установке Teneo продумана каждая деталь, поэтому вы сможете заниматься лечением в любой ситуации. От простого пользовательского интерфейса до гибкой конфигурации позиций для инструментов – все это воплощено в Teneo.



7-дюймовый дисплей EasyTouch



Большой настраиваемый сенсорный экран обеспечивает интуитивно понятное управление. В простом режиме он отображает только те функции, которые вам нужны в определенный момент. EasyTouch поможет легко и безопасно управлять стоматологической установкой на протяжении всего лечения.

Позиции для инструментов: 6 + 1



Хорошо организованные инструменты и средства управления: вы можете настроить 6 позиций для инструментов, что позволит легко адаптировать установку к вашим потребностям. Интраоральную камеру можно разместить на дополнительном держателе на поддоне.

Операционный светильник LEDview Plus



LEDview Plus обеспечивает идеальное сочетание интенсивности света, цвета и размера светового поля. В интегрированном композитном режиме светоотверждаемые материалы могут полимеризоваться с необходимой вам скоростью без преждевременного отверждения. Расположение светильника и управление им осуществляются при помощи бесконтактного сенсора. Доступна потолочная конфигурация и потолочная комбинация LEDview Plus/Heliodont Plus.

Интраоральная камера SiroCam AF+



Усовершенствуйте получение снимков и документирование лечения с помощью камеры SiroCam AF+, сочетающей в себе превосходное качество съемки и простоту эксплуатации. Снимки отображаются на мониторе 22 " в HD-качестве.



Вы стремитесь к доверию пациентов – Teneo вам в этом поможет

Близкий контакт с пациентом необходим для достижения первоклассных результатов лечения. Понятный процесс лечения в значительной степени способствует возникновению доверия у пациентов. Teneo позволяет четко визуализировать объяснение плана лечения на месте, запоминать индивидуальное положение кресла для каждого пациента и тем самым способствовать укреплению доверия к вашему лечению.

Полезные советы от Teneo

- Используйте встроенный монитор для демонстрации интраоральных снимков, трехмерных рентгеновских изображений или презентаций при помощи меню коммуникации с пациентом.
- Создайте доверительные отношения с пациентом – объясните ему процесс лечения, чтобы снять тревогу.
- Объясните пациенту и задокументируйте превосходными высококачественными снимками интраоральной камеры SiroCam AF+, что лечение прошло успешно.





Вы знаете своих пациентов – как их знает и Teneo

Если пациент расслаблен, его легче лечить, а это способствует идеальному результату лечения. Независимо от того, нужна ли дополнительная опора для пожилых пациентов или вы хотите, чтобы пациент перестал опасаться стоматологического лечения, Teneo превзойдет ожидания самого пристрастного пациента. Функции массажа и поясничной опоры помогают пациентам расслабиться.



Основываясь на потребностях

Позиционирование с функцией OrthoMotion особенно хорошо подходит для лечения пожилых пациентов и пациентов с ограниченными возможностями: спинка и сиденье кресла сохраняют постоянный угол, защищая позвоночник.




Эргономичное позиционирование

Функция ErgoMotion обеспечивает компенсацию движений сиденья и спинки кресла для эргономичного изменения положения позвоночника. Кресло с пациентом удобно перемещается в нужную позицию.



Мир элегантности

Классические, неподвластные времени цвета для создания благородной, изысканной атмосферы.

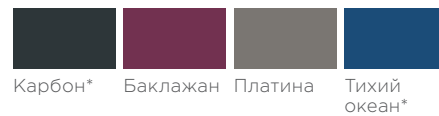

Мир природы

Нежные, теплые цвета для спокойной, расслабляющей атмосферы.



Мир жизнерадостия

Яркие, свежие цвета для живой и современной атмосферы.



* Цвета, доступные для мягкой обивки.

Форма и цвет

Чтобы придать вашей клинике неповторимую атмосферу, в стоматологической установке Teneo идеально сочетаются форма и оттенки, что несомненно притягивает взгляд. Независимо от того, предпочитаете вы классический или современный стиль, Teneo всегда будет элегантно смотреться в интерьере клиники. Это также подтверждает дизайнерская награда iF Design Gold Award и номинация на премию German Design Award.



Бескомпромиссное качество



Терморегулирующая обивка «Премиум»

Обеспечивает комфорт пациента, рассеивая накопленное сиденьем и спинкой кресла тепло.



Мягкая обивка

Инновационный материал обивки обладает особенной мягкостью, гарантируя идеально удобное расположение пациента в кресле.

Изысканно и функционально

Дайте пациентам ощущение исключительности вашей клиники. Мягкая обивка сочетает несравненный комфорт и прекрасный дизайн: мягкий материал очень приятен на ощупь, его легко чистить и дезинфицировать, а контрастная строчка и широкая опора для ног без слов говорят о высоком качестве стоматологической установки вплоть до мельчайших деталей.

Тенео – гигиена легко и просто

Тенео позволяет соответствовать самым высоким стандартам клинической безопасности за счет использования гладких, легко очищаемых поверхностей, съемных компонентов и встроенных адаптеров для санитарной обработки – все направлено на максимальный гигиенический контроль за минимальное время и с минимальными усилиями для вас и вашего коллектива.



Легко очищаемые поверхности. Тенео изначально разработали для эффективного соблюдения самых строгих санитарных требований. Все поверхности очень гладкие и могут быть легко очищены и продезинфицированы.



Термодезинфицируемые элементы. Все критические с точки зрения гигиены элементы можно снять и подвергнуть термической дезинфекции или стерилизации. Это снижает опасность перекрестного заражения медицинского персонала и пациентов.



Встроенный адаптер для санитарной обработки.

Все шланги инструментов могут быть подсоединены для очистки к встроенным адаптерам санитарной обработки. Программы автопромывки в ежедневном режиме и в режиме после каждого сеанса лечения автоматически промывают аспирационные шланги или дезинфицируют их в ежемесячном режиме с использованием Dentosept P. Все эти процессы абсолютно безопасны и экономят рабочее время.



Съемная чаша плевательницы. Для удобной очистки и образцовой клинической гигиены.



Адаптеры для санитарной обработки аспирационных шлангов.

Все аспирационные шланги могут быть подсоединены для очистки к встроенным адаптерам санитарной обработки. Кроме того, аспирационные шланги могут быть подключены к адаптерам и промыты потоком воды нажатием одной кнопки непосредственно в процессе лечения. Для обеспечения максимальной гигиенической безопасности при промывке автоматически добавляются чистящие и дезинфицирующие средства.

Это не просто Teneo – это ваш Teneo

Teneo – это больше чем просто стоматологическая установка. Это проявление вашей индивидуальности. Какой бы ни была конфигурация вашей установки, Teneo всегда гарантирует: взаимодействие всех систем идеально гармонично. Вдохновляйтесь!

Teneo устанавливает стандарты

Совершенная эргономика и функциональность в сочетании с качественными материалами помогут вам эффективно создать идеальный персональный рабочий процесс.



Кресло пациента



Модуль врача



Модуль ассистента



Гидроблок



Система цифровой визуализации Sivation



Рабочие стулья

Ваши индивидуальные опции

Индивидуальные дополнительные опции и оборудование, входящее в базовую комплектацию

Кресло пациента	
Позиционирование кресла для конкретного пациента*	■
Автоматический подголовник с настройкой позиционирования под конкретного пациента*	■
Обивка «Премиум»	
Мягкая обивка	■
Терморегулирующая обивка	□
Поясничная опора/ функция массажа	■
Съемный подлокотник, отклоняемый вправо	□
Съемный подлокотник, левый	□
Педаль перекрестного действия	■
Беспроводная педаль ножного управления	■
Разъем для подключения настольных приборов	□
Подушка для детей и пациентов небольшого роста	□
Монтажная плита	□
OrthoMotion	■
ErgoMotion	■
SlowMotion	■

Модуль врача	
6 позиций для инструментов. EasyTouch. Съемная ручка, съемный держатель инструментов.	
Пустер Sprayvit M со светодиодной подсветкой	□
1-й привод бора (для микромотора или турбины)	■
2-й привод бора (для микромотора или турбины)	■
3-й привод бора (для микромотора или турбины)	■
4-й привод бора (для микромотора или турбины)	□
Электрический микромотор BL	□
Электрический микромотор BL ISO C	□
Электрический микромотор BL Implant	□
Турбинный шланг	■
Ультразвуковой скейлер SiroSonic TL	□
Электрохирургический коагулятор SIROTOM	□
Функция имплантологии	□
Функция эндодонтии	□
Система реципрокных файлов	□
Апекслокатор с выводом информации на монитор Sivation	□
Интегрированный насос для физраствора	□
USB-порт	■
Управление курсором без помощи рук	■
Угловой наконечник с подсветкой T1 Line Endo 6 L	□
Угловой наконечник Implant 20:1	□

Модуль ассистента	
4 позиции для инструментов. Съемный держатель инструментов.	
Полимеризационная лампа Satelec mini L.E.D.	□
Хирургический пылесос	□
Пустер Sprayvit M со светодиодной подсветкой	□
Пылесос	■
Слюноотсос	■
Всасывающие шланги с ползунком	□

Гидроблок	
Система постоянной дезинфекции с функцией санации	■
Очистка аспирационных шлангов с использованием химических средств	■
Разъем для подачи гидроколлоидного раствора	□
Система влажной аспирации с клапаном в плевательнице	■
Автоматический отделитель	□
Отделитель амальгамы	□
Съемная автоматическая поворотная стеклянная плевательница	■
Функции промывки и автопромывки	■
Функция Aqua	■

Цифровая система визуализации Sivation	
Интраоральная камера SiroCam AF+	□
Монитор 22" на поддоне (поддон в комплекте)	□
Монитор 22" на стойке светильника	□
Дополнительный держатель для камеры	□
Комплект кабелей для подключения к ПК	□

Рабочие стулья	
На выбор длинная или короткая газовая пружина.	
Hugo Freehand (с ножной регулировкой)	□
Hugo Manual (с ручной регулировкой)	□
Hugo Manual Plus (с ручной регулировкой и опорным кольцом для ног)	□
Carl Manual (с ручной регулировкой)	□
Carl Manual Plus (с ручной регулировкой и опорным кольцом для ног)	□

Дополнительные опции	
Поддон Sirona	□
Сетевой интерфейс (Ethernet)	■
Управление ПК при помощи EasyTouch	■
Дистанционная диагностика	■
Операционный светильник LEDview Plus	□
Операционный светильник LEDview Plus с креплением на потолке	□
Адаптер для размещения Heliodont Plus на потолке	□
Адаптер для размещения Heliodont Plus на установке	□

* Доступно с Sidexis 4.

■ В базовой комплектации или в составе пакета.

□ Опция.

Опции

Пакетные предложения



Innovation

- Пуستر Sprayvit M на модуле врача и модуле ассистента
- 2 микромотора BL (BL ISO C за дополнительную плату)
- Скейлер SiroSonic TL
- Операционный светильник LEDview Plus
- До двух рабочих стульев Hugo или Carl по сниженной цене



Endo

- Функция эндодонтии
- Апекслокатор
- Угловой наконечник с подсветкой T1 Line Endo 6 L
- Адаптер Basic Apex (опция)
- Держатель для апекслокатора
- Дополнительная опция: система реципрокных файлов



Implant

- Расширенная функция имплантологии
- Интегрированный насос для физраствора
- Микромотор BL Implant
- Угловой наконечник Implant 20:1



Sivation

- Монитор 22"
- Камера SiroCam AF+
- Монитор размещается на поддоне или на стойке светильника
- Подключение камеры на модуле врача



Подушка для детей и пациентов небольшого роста



Апекслокатор



Разъемы для подключения настольных приборов



Интегрированный насос для физраствора



Адаптер для имплантологического наконечника



Heliodent Plus с креплением на установке



Монитор 22" на поддоне



Монитор 22" на стойке светильника

Dentsply Sirona для вас

Мы поддерживаем стоматологов в их стремлении предоставить лучшее, безопасное и более быстрое лечение. Когда вы каждый день работаете с максимальной отдачей, того же вы ожидаете и от своего оборудования. Именно поэтому мы предлагаем инновационные решения, улучшающие стоматологическое лечение. Это означает, что вы всегда сможете работать на оборудовании Dentsply Sirona, обладающем самыми высокими стандартами качества. Вы можете положиться на него и сегодня, и в будущем.

Инновации на практике



Являясь мировым лидером по инновациям в области стоматологического оборудования, мы постоянно инвестируем в исследования и в будущее современной стоматологии. Благодаря сетевым технологиям с интегрированными решениями, а также оптимизации процесса лечения мы создаем оборудование, повышающее качество лечения, создающее больший комфорт и безопасность для пациента, а также экономящее время и средства стоматологической клиники.

Что это означает для Teneo?

Качество «Сделано в Германии»

Стоматологическая установка была разработана, изготовлена и полностью протестирована на заводе Dentsply Sirona в Бенсхайме, Германия. Тщательная заводская сборка обеспечивает Teneo самое лучшее качество, надежность, безопасность и долгий срок службы.

Новаторство и инновационность

Teneo постоянно развивается: установка может быть обновлена – благодаря USB-интерфейсу могут быть встроены новые функции, а с помощью Ethernet-интерфейса могут быть легко устранены различные неполадки.

Мастерство изготовления

Для Teneo используются только самые лучшие материалы. Основание, крепление для сиденья и спинки кресла пациента выполнены из хорошо продуманной комбинации стали и алюминия. В результате установка Teneo очень легкая, но чрезвычайно прочная и надежная.

Процедурные решения

Профилактика
Реставрация
Ортодонтия
Эндодонтия
Имплантология
Протезирование

Технологические платформы

CAD/CAM
Рентгеновские системы
Стоматологические установки
Инструменты

Dentsply Sirona

www.dentsplysirona.com

THE DENTAL
SOLUTIONS
COMPANY™

